

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТЕРМОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НЕФТЕПРОДУКТОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 400-80

Издание официальное

E



ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТЕРМОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Технические условия

ΓΟCT 400---80

Glass thermometers for testings of petroleum products.

Specifications

OKIT 43 2123

Дата введения 01.01.81

для термометров ТИН2, ТИН3, ТИН5—ТИН9, ТИН12

01.01.83

Настоящий стандарт распространяется на стеклянные термометры, предназначенные для измерения температур при испытании нефтепродуктов (далее — термометры), изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.

Требования п. 2.12 настоящего стандарта являются обяза-

тельными, другие требования — рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Типы, основные параметры и размеры термометров должны соответствовать указанным на черт. 1—8 и в табл. 1—8.

Для термометров, предназначенных для учебных целей, требования данного пункта устанавливают в технических условиях на наборы термометров.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 4).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

*

F

- **(С)** Издательство стандартов, 1980
- © Издательство стандартов, 1994 Переиздание с изменениями

Тия	Қод ОҚП	Испол- нение	Днапазон измерения, °C	Цена деления шкалы, °С
	43 2123 0551 00	1.	От —7 до 110	0,5
тині	43 2123 0552 10	2	От 90 до 360	2,0
	43 2123 0553 09	3	От —58 до 50	0,5
TH2	43 2123 0211 06		От 0 до 360	1,0
	43 2123 0581 05	1	От 18 до 25	
тин2	43 2123 0582 04	2	От 39 до 54	0,2
	43 2123 0583 03	3	От 95 до 105	
	43 2123 0411 00	1	От 0 до 150]
TH4	43 2123 0412 10	2	От 100 до 250	1,0
A	43 2123 0415 07	3	От 200 до 350	
TH5	43 2123 0511 08	_	От 30 до 100	0,2
Active to the second	43 2123 0611 05	1	От —38 до 50	1,0
тинз	43 2123 0612 04	2	От —30 до 30	0,5
	43 2123 0613 03	3	От —80 до 20	1,0
	43 2123 0631 01	1	От —2 до 400	
ТИН4	43 2123 0632 00	2	От —2 до 300	1,0
TH8	43 2123 0541 02		От —80 до 60	1,0

Таблица 1

Пределы допускаемой погрешности, °С	Глубина погруже- ния, мм	Длина деле- ния шкалы, мм, не менее	Область применения
±0,5	57±5	0,50	Для определения тем- пературы вспышки в за- крытом тигле
±1,5 ±0.5		0,50	крытом тигие
±1,0 (для диапазонов измерения от 0 до 260 включ.), ±2,0 (для диапазонов измерения св. 260)	45±5	0,50	Для определения тем- пературы вспышки в от- крытом тигле
±0,1	90±5	0,89	При определении условной вязкости
± 1.0 (для диапазонов измерения от 0 до 210 включ.), ± 2.0 (для диапазонов измерения св. 210)	Полная	0,70	Для определения тем- пературы каплепадения
±0,2	65±5	0,50	Для определения тем- пературы плавления па- рафинов
,	108±3	0,54	
$\pm 0,5$	160±3	0,65	Для определения тем - пературы застывания и
± 1.0 (для диапазонов измерения от 20 до -33 включ.), ± 2.0 (для диапазонов измерения ниже -33)	76±5	0,70	помутнения
± 1.0 (для диапазонов измерения от -2 до 300 включ.), ± 1.5 (для диапазонов измерения св. 300) ± 0.5 (для диапазонов измерения от -2 до 150 включ.), ± 1.0 (для диапазонов измерения св. 150)	Полная	0,43	При определении фрак- ционного состава
± 3.0 (для диапазонов измерения от -80 до -60 включ), ± 2.0 (для диапазонов измерения св. -60 до -40 включ.), ± 1.5 (для диапазонов измерения св. -40 до -20), ± 1.0 (для диапазонов измерения св. -20)	160±5	0,70	Для определения низ- ких температур нефте- продуктов

Тип	Код ОКП	Испол- нение	Диапазон измерения, °С	Цена деления шкалы, °С	
	43 2123 0641 10	1	От —20 до 20	0,2	Ī
тин5	43 2123 0642 09	2	От 17 до 25	0,1	
	43 2123 0643 08	3	От 0 до 50	0.0	
	43 2123 0644 07	4	От 50 до 102	0,2	
тин6	43 2123 0661 06		От —35 до 30	1,0	
	43 2123 0671 04	1	От 20 до 100		!
	43 2123 0672 03	2	От 25 до 105	,	
ТИН7	43 2123 0673 02	3	От 90 до 170	0,2	!
	43 2123 0674 01	4	От —38 до 42	·	
тин8	43 2123 0711 02		От —80 до 20	0,5	
тин9	43 2123 0721 00		От —5 до 400	1,0	
	43 2123 0731 09	1.	От 18,6 до 21,4		
	43 2123 0732 08	2	От 36,6 до 39,4		
тин10	43 2123 0733 07	3	От 48,6 до 51,4	0,05	
	43 2123 0734 06	4	От 98,6 до 101,4	0,00	
	43 2123 0735 05	5	От —2 до 2		
	43 2123 0736 04	6	От —41,4 до —38,6		
	43 2123 0737 03	7	От 23,6 до 26,4		
	43 2123 0738 02	8	От 38,6 до 41,4		
	43 2123 0739 01	9	От 58,0 до 62,0		
	43 2123 0740 08	10	От —19,2 до —15,4		

Продолжение табл. 1

Пределы допускаемой погрешности, °С	, Глубина погруже- ния, мм	Длина деле- ния шкалы, мм, не менее	Область применения
±0,1	Полная	0,39	При определении плот- ности
±0,5	255±5	0,70	Для определения тем- пературы хрупкости
±0,2	65±5	0,36	Для определения ани- линовой точки
± 0.2 (для диапазонов измерения от 90 до 100 включ.); ± 0.4 (для диапазонов измерения св. 100)	51±5	0,59	
± 0.3 (для диапазонов измерения от -38 до 0); ± 0.2 (для диапазонов измерения св. 0)			
±1,0	Полная	0,70	Для определения тем- пературы помутнения и начала кристаллизации
± 1.0 (для диапазонов измерения до 370 включ.); ± 1.5 (для диапазонов измерения св. 370)	Полная	0,46	При определении фак- тических смол
±0,1	Полная	0,5	При определении кине- матической вязкости
	,		
	1		
	[-	

Тип	Код ОКП	Испол- нение	Диапазон измерения, °C	Цена деления шкалы, °С	
тин11	43 2123 0761 03 43 2123 0762 02	1 2	От —46,3 до —43,5 От —50,3 до —47,5	0,05	
ТИН12	43 2123 0781 10		От 34 до 42	0,1	
тин13	43 2123 0786 06		От —37 до 21	0,5	
ТИН14	43 2123 0791 08		От 38 до 82	0,1	
тин15	43 2123 0796 03		От —5 до 300	1,0	

Примечание. Термометры типов ТН2, ТН4 и ТН8 модернизированы и

Примеры условного обозначения при заказе: термометра типа ТН4 исполнения 2 модернизированного:

Термометр ТН4—2 М

то же, термометра типа ТН4 исполнения 2 модернизированно *Термометр ТН4—2 М (без гильзы* то же термометра типа ТИН12 немодернизированного:

Термометр ТИН 12

Продолжение табл. 1

Пределы допускаемой погрешности, °С	Глубина погруже- ния, мм	Длина деле- ния шкалы, мм, не менее	Область применения
±0,2	Полная	0,5	При определении псев- докумола и метаксилола
±0,1		0,61	При определении дав- ления насыщенных паров:
±0 ,2	79±5	1,8	При определении со- держания масла в твер- дых парафинах
±0,1	79±0	0,75	Для определения тем - пературы плавления па- рафинов
±1,0	75±5	0,7	При определении тем- пературы каплепадения


условное обозначение термометров дополняется буквой «М».

ΓΟCT 400-80;

го без гильзы и чашечки: и чашечки) ГОСТ 400—80;

ΓΟCT 400-80.

Термометр типа ТИН1

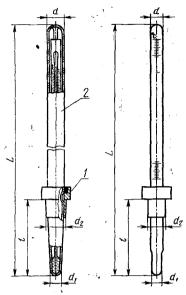


1-гильза; 2-термометр Черт. 1

Таблица 2

	1
d_1	d_2
Не более 7	12-0,15
5,25±0,75	

Термометр типа ТН2

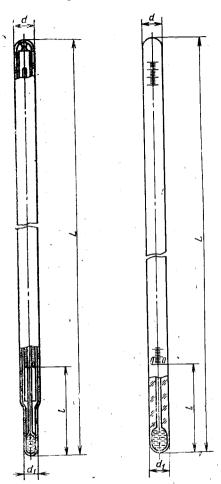


Черт. 2

MM

Таблица З

	***			· .
Обозначение типораз мер а	L	t	d	<i>d</i> ₁ не более
ТН2: с вложенной шкальной пластиной	330±10	4 5± 5	$ \begin{array}{c} 7,5 \pm 0,5 \\ 7,5 \pm 1,0 \end{array} $	6

Термометр типа ТН4

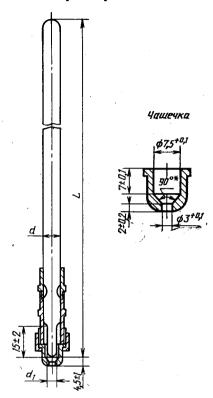

* Размер обеспечивается инструментом.

Черт. 4**

Таблица 4

171.272					
Обозначение типоразмера	L	ď	d_1		
TH4	250 ± 10	8,5±0,5	3,5±0,5		

^{**} Черт. 3. **(Исключен, Изм. № 3).**

Термометры типов ТН5, ТИН3-2, ТН8, ТИН6

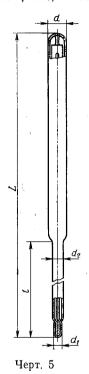


Таблица 5

MM					
Обозначени е типоразмера	L	ı	d .	d_1	′ d ₂
TH5	300±10	65±5	$7,5 \pm 0,5$	5,5±0,5	6±0,5
ТИН3-2	330±10	160±3	10±1,0	6±1,0	6±1,0
TH8	400±10	160±5	11±1,0	$5,5 \pm 1,5$	$6,5 \pm 0,5$
тин6	380±5	255±5	9±1	5+0,5	5+0,5

Термометры типов ТИН3-1, ТИН3-3, ТИН4, ТИН7-1, ТИН8, ТИН9, ТИН13, ТИН14, ТИН15

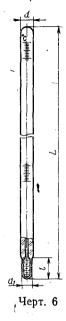


Таблица б

		мм		·
Обозначение типоразмера	L	t	d	d ₁
ТИН3-1	231±5	8,25±1,25	7,5±0,5	6,25±0,75
тинз-з	232±5	8,75±0,75		$5,75 \pm 0,75$
ТИН4	386±5		6,5±0,5	$5,5\pm0,5$
тин7-1	330±10		$7,5\pm0,5$	5,5±0,5
тин8	300±10	12±4,00	6,75±1,2	Не более 8
тин9	415±5		$6,75 \pm 0,75$	
тин13	350±5	$17,5 \pm 2,5$	7,5±0,5	6+1
ТИН14	377±5	23±5	6,5±0,5	5+1
ТИН15	390±5	$12,5 \pm 2,5$	5,5± 0,5	5,5 ± 0,5

Таблица 7

 6 ± 1

Термометры типов ТИН2, ТИН5, ТИН7-2 — ТИН7-4, ТИН12



Черт. 7 мм

Обозначение типоразмера	L	d ,
ТИН2-1	212±5	
ТИН2-2	237±5	•
ТИН2-3	212±5	
ТИН5-1	420±5	
ТИН5-2	255+5	

419±5

275±5

 420 ± 5

ТИН7-2 ТИН7-3

ТИН7-4

ТИН12 ТИН5-3

ТИН5-4

Термометры типов ТИН-10, ТИН11

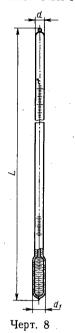


Таблица 8

мм					
Обозначение типоразмера	L	L d			
ТИН10-1		5+1	7+1		
ТИН10-2	- 000 110				
ТИН10-3	$\frac{1}{280 \pm 10}$	$6,5 \pm 1,5$	0 =		
ТИН10-4			$6,5 \pm 1,5$		
ТИН10-5		F 1 1	'		
ТИН10-6	305±5	5+1	7+1		
ТИН10-7	:				
ТИН10-8	280±5	1			
ТИН10-9	•	$6,5\pm1,5$	$6,5 \pm 1,5$		
ТИН10-10					
ТИН11-1	305 ± 5				
ТИН11-2	-	5+1	7+1		
	l .	I			

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Термометры должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 28498—90 по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Палочные термометры по заказу потребителя изготовляют с

шариком в верхней части.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

2.2. Для заполнения термометров типов ТН2, ТН4, ТН5, ТИН1-1, ТИН1-2, ТИН2, ТИН3 (исполнения 1 и 2), ТИН4, ТИН5—ТИН7, ТИН9, ТИН10 (исполнения 1—5, 7—10), ТИН12—ТИН15 следует применять ртуть по ГОСТ 4658—73.

Для заполнения термометров типов ТИНЗ (исполнение 3), ТН8, ТИН8 следует применять толуол по ГОСТ 5789—78 или другую жидкость, по физико-химическим свойствам заменяющую

толуол.

Для заполнения термометров типов ТИН1-3, ТИН10 (исполнение 6), ТИН11 следует применять ртутно-таллиевую амальгаму (ртуть по ГОСТ 4658-73-92,5%; таллий по ГОСТ 18337-80-7,5%).

Мениск столбика жидкости не должен опускаться в резервуар у термометров, наполненных ртутью, при температуре минус 35°C, у термометров наполненных ртутно-таллиевой амальгамой, — при температуре минус 55°C.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 5).

2.3. Термометры типов ТИН10 и ТИН11 должны быть вакуумными.

2.4. Ширина отметок шкалы термометров типов ТИН10 и

ТИН11 должна быть не более 0,3 длины деления шкалы.

2.5. Термометры типов ТИН10, ТИН11 и ТИН14 независимо от предела измерения должны иметь отметку 0 °C.

2.4; 2.5. (Измененная редакция, Изм. № 2).

2.6. (Исключен, Изм. № 2).

2.7. Выше и ниже нулевой отметки термометров типов ТИН10, ТИН11 и ТИН14 должны быть нанесены дополнительные деления, число которых должно быть не менее значения допускаемой погрешности для термометра конкретного типа.

2.8. Ампулы термометров типов ТИН10 и ТИН11 должны быть

подвергнуты отжигу и искусственному старению.

Удельная разность хода лучей не должна превышать 8 млн⁻¹. Удельная разность хода лучей в местах обработки после отжита не должна превышать 24 млн⁻¹.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 5).

2.9. (Исключен, Изм. № 4).

2.10. Термометры типа ТИН1 должны быть изготовлены с гильзами из стали по ГОСТ 1414—75. Параметры шероховатости наружных поверхностей гильз должны быть $Ra \le 2,5$ мкм по ГОСТ 2789—73, для термометров, предназначенных для экспорта, — $Ra \le 1,25$ мкм.

Термометры типа ТН4 должны быть изготовлены с чашечками и гильзами из латуни по ГОСТ 15527—70. Гильзы должны быть жестко закреплены на термометрах. Параметр шероховатости внутренней поверхности чашечки должен быть Ra < 0.63 мкм, наружных поверхностей чашечек и гильз — Ra < 2.5 мкм. Поверхности чашечек и гильз должны иметь окисное покрытие по ГОСТ 9.306—85.

Для термометров типа ТН4, предназначенных для экспорта, параметр шероховатости внутренней поверхности чашечки должен быть $Ra \le 0.63$ мкм, наружной поверхности гильз — $Ra \le 1.25$ мкм. Поверхности должны иметь защитное цинковое покрытие с последующим хроматированием или трехслойное (медь—никель—хром) по ГОСТ 9.306—85.

Примечание. Конструкция чашечки термометра устанавливается рабочими чертежами, утвержденными в установленном порядке.

По согласованию с потребителем допускается термометр типа ТН4 изготовлять без гильзы и чашечки. Условное обозначение термометра при заказе дополняется словами: «(без гильзы и чашечки)».

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4).

2.11. Средняя наработка до отказа для ртутных и ртутно-таллиевых термометров должна быть не менее 40000 ч, для термометров, наполненных толуолом, — 28600 ч, что соответствует вероятности безотказной работы 0,95 за 2000 ч для ртутных и ртутно-таллиевых термометров и 0,93 за 2000 ч для термометров, наполненных толуолом.

Критерием отказа термометров следует считать превышение

предела допускаемой погрешности (п. 1.1).

(Измененная редакция, Изм. № 3).

- 2.11а. (Исключен, Изм. № 5).
- 2.12. Термометры в упаковке для транспортирования должны выдерживать воздействие транспортной тряски с ускорением $30~\text{м/c}^2$ при частоте от 60~до~80 ударов в минуту в течение 2~ч.
- 2.13. Поверяемые температурные отметки шкалы приведены в табл. 10.

K каждому термометру следует прилагать инструкцию по эксплуатации.

Допускается прилагать одну инструкцию по эксплуатации к нескольким термометрам. Число термометров устанавливают по согласованию между изготовителем и потребителем.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

Таблица 10*

Термометры		. ,		
Тип	Исполнение	Поверяемые температурные отметки шкалы, °С -		
тин1	1 2 3	0; 30; 50; 80; 100 100; 200; 300 —50; —30; 0; 30; 50		
TH2	<u> </u>	0; 100; 150; 200; 250; 300		
тин2	1 2 3	18; 21; 25 40; 45; 50 95; 100; 105		
TH4	1 2 3	0; 50; 100; 150 100; 150; 200; 250 200; 300; 350		
TH5		40; 60; 80; 100		
тинз	1 2 3	-30; -20; 0; 20; 40 -30; -20; 0; 10 -78; -60; -40; -20; 0; 20		
тин4	1 2	0; 100; 200; 300; 370 0; 100; 200; 300		
TH8				
тин5	1 2 3 4	-20; -10; 0; 20; 40; 60; 80; 100 0; 21; 25 0; 20; 40 60; 80; 100		
ТИН6		30,0; 30		
тинт	1 2 3 4	20; 40; 60; 80; 100 40; 60; 80; 100 100; 120; 140; 160 —30; —20; 0; 20; 40		
тин8		—78; —60; —40; —20; 0; 20		
ТИН9		0; 100; 200; 300; 370		
тин10	1 2	0; 19; 20; 21,1 0, 37; 37,8; 39		

^{*} Табл. 9. (Исключена, Изм. № 4).

Термометры				
Тип	Исполнение	Поверяемые температурные отметки шкалы, °С		
ТИН:110	3 4 5 6 7 8 9	0; 49; 50; 51 0; 98,9; 100; 101 -1; 0; 1 -41; -40; -39; 0 0; 24; 25; 26 0; 39; 40,5; 41 0; 59; 60; 61 0; -18; -17,8; -17		
тини	1 2	-46; -45; -44; 0 -50; -49; -48; 0		
ТИН12		0; 34; 38; 42		
тин13		-35; -20; 0; 20		
тин14		40; 60; 80		
тин15	_	0; 100; 200; 300		

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

- 3.1. Для проверки соответствия термометров требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить государственные, приемосдаточные, периодические испытания и испытания на надежность.
- 3.2. Государственные испытания по ГОСТ 8.383—80 и ГОСТ 8.001—80.
 - 3.1; 3.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).
- 3.3. Приемосдаточным испытаниям следует подвергать каждый термометр на соответствие требованиям пп. 1.1 (кроме размеров, обозначенных знаком «*», длины деления шкалы); 2.1; 2.2; 2.5; 2.7; 2.9; 2.10.

На соответствие требованиям пп. 1.1 (длина деления шкалы), 2.4 и 2.8 проверяют не менее 3% термометров от партии.

Партией следует считать число термометров одного типа, предъявленных к приемке по одному документу.

Результаты проверки распространяют на всю партию.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

3.4. Периодическим испытаниям, проводимым не реже раза в

год, следует подвергать не менее 10 термометров на соответствие всем требованиям настоящего стандарта (кроме п. 2.11).

(Измененная редакция, Изм. № 4).

3.5. Результаты периодических испытаний считают удовлетворительными, если термометры, подвергнутые испытаниям, соответствуют всем требованиям настоящего стандарта.

При несоответствии термометров хотя бы одному из требований настоящего стандарта, проводят повторные испытания удво-

енного числа термометров.

Результаты повторных испытаний являются окончательными.

3.6. Контрольные испытания на безотказность (п. 2.11) следует проводить один раз на установочной серии или после модернизации, влияющей на безотказность, одноступенчатым методом при $P_{\alpha}=0.95$; $P_{\beta}=0.7$; $\alpha=0.1$; $\beta=0.2$; объеме выборки n=10; приемочном числе отказов c=1 для ртутных и ртутно-таллиевых термометров и при $P_{\alpha}=0.93$; $P_{\beta}=0.7$; $\alpha=0.1$; $\beta=0.2$; объеме выборки n=9; приемочном числе отказов c=1 для термометров, наполненных толуолом.

Продолжительность испытаний — 2000 ч. (Измененная редакция, Изм. № 3, 4, 5).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Испытания термометров на соответствие требованиям нас-

тоящего стандарта следует проводить по ГОСТ 28498—90.

4.2. Размеры термометров, чашечек, гильз (п. 1.1) и качество исполнения термометров (пп. 2.4; 2.5; 2.7 и 2.9) следует проверять измерительным инструментом по ГОСТ 166—89, ГОСТ 427—75 и визуально.

Проверку опускания столбика несмачивающей жидкости в ре-

зервуар (п. 2.2) проводят по ГОСТ 28498-90.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

4.3. (Исключен, Изм. № 2).

4.4. Качество отжига ампул и верхней части термометров

(п. 2.8) следует проверять по ГОСТ 7329—91.

4.5. Качество искусственного старения термометров в соответствии с ГОСТ 28498—90 следует проверять при температуре верхнего предела измерения посредством выдержки их в течение 6 ч в термостате или печи.

Термометры до начала испытаний проверяют на отметке 0° С в сосуде тройной точки воды, затем выдерживают в термостате, охлаждают до окружающей температуры (20 ± 5) $^{\circ}$ С в течение 24 и снова проверяют на отметке 0° С в сосуде тройной точки воды.

Термометры считают выдержавшими испытания, если смещение отметки 0°C не превышает значений, указанных в табл. 11.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Таблица 111

Температура испытаний		Значения смещения отметки 0 или нижней оцифрованной отметки при цене деления						
		0,05	0,1	0,2	0,5	1,0	2,0	
Св.	До 25 25 до 40 вкл	юч.	0,02	0,,05	0,1	0,25		
» »		» »		0,1			0,5	_
» »		» »	<u></u>				-	1,0

4.6. Проверка погрешностей термометров (п. 1.1) — по ГОСТ 8.279—78.

Для термометров с гильзами допускается проводить проверку без гильз.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

4.7. (Исключен, Изм. № 4).

- 4.8. Качество покрытий гильз и чашечек термометров, предназначенных для экспорта (п. 2.10), следует проверять по ГОСТ 9.302—88.
- 4.9. Испытания термометров на надежность (п. 2.11) следует проводить по программе и методике, утвержденным в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

4.10. (Исключен, Изм. № 4).

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На каждом термометре должна быть нанесена маркировка, содержащая:

товарный знак предприятия-изготовителя;

обозначение °С;

квартал и год изготовления (последние две цифры);

обозначение настоящего стандарта;

наименование или условное обозначение смачивающей термометрической жидкости;

глубину погружения (для термометров частичного погружения);

отметку «состарен» — для термометров, прошедших искусственное старение;

порядковый номер термометра по системе нумерации предприятия-изготовителя. Допускается не наносить порядковый номер на термометры, не имеющие паспорта;

букву У — на термометрах, предназначенных для учебных це-

лей;

знак Государственного реестра по ГОСТ 8.383-80.

Допускается наносить только на потребительской таре или указывать на бумажной обертке или в эксплуатационной документации следующую маркировку:

условное наименование термометрической жидкости; знак Государственного реестра по ГОСТ 8.383—80;

обозначение стандарта.

Маркировка термометров, предназначенных для экспорта, должна соответствовать условиям договора между предприятием и внешнеэкономической организацией.

5.2. Транспортная маркировка грузов должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192—77.

Транспортная маркировка грузов, предназначенных для экспорта, должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192—77 и условиям договора между предприятием и внешнеэкономической организацией.

5.3. Каждый термометр должен быть уложен в футляр или коробку, изготовленные по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке, или другую упаковку с мягкой или амортизирующей прокладкой, обеспечивающую сохранность термометров при хранении и транспортировании.

По согласованию с потребителем допускается упаковывать термометры по 5—10 шт. в одну коробку с мягкой или амортизирующей прокладкой.

5.4. Каждый термометр, предназначенный для экспорта, должен быть уложен в футляр. Футляр из бумаги для термометров, предназначенных для экспорта, должен быть окрашен нитроэмалью НЦ по ГОСТ 5406—84 или ХВ по ГОСТ 10144—89.

Допускается не красить футляры, если это не предусмотрено в договоре между предприятием и внешнеэкономической организацией.

5.5. Термометры в футлярах, коробках или другой упаковке должны быть уложены в транспортную тару — деревянные ящики по ГОСТ 2991—85, ГОСТ 5959—80, ГОСТ 10350—81, ГОСТ 15841—88, ГОСТ 16511—86, ГОСТ 16536—90 или ящики из гофрированного картона по ГОСТ 22852—77 и ГОСТ 9142—90 с прокладкой сухим упаковочным материалом.

При перевозке в универсальных контейнерах по ГОСТ 15102—75 термометры в футлярах, коробках или другой упаковке должны быть уложены в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 22852—77 и ГОСТ 9142—90 или сформированы в пакеты

по чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Транспортная тара и упаковка должны обеспечивать сохранность термометров при транспортировании транспортом любого вила.

5.6. Термометры в футлярах или в другой упаковке, предназначенные для экспорта, должны быть упакованы в ящики по ГОСТ 24634—81.

Термометры в футлярах, предназначенные для экспорта в страны с тропическим климатом, должны быть упакованы в чехлы из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354—82.

Для районов с умеренным климатом термометры допускается упаковывать в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142—90 и ГОСТ 22852—77.

- 5.7. В соответствии с условиями договора между предприятием и внешнеэкономической организацией ящики и прокладочный материал для термометров, предназначенных для экспорта в страны с тропическим климатом, должны быть подвергнуты защитной обработке в соответствии с ГОСТ 15155—89.
- 5.8. Масса ящика с упакованными термометрами не должна превышать 50 кг.
- 5.9. В каждый ящик с термометрами должна быть вложена сопроводительная документация с указанием:

наименования и количества термометров;

обозначения настоящего стандарта;

наименования термометрической жидкости.

Товаросопроводительная документация для термометров, предназначенных для экспорта, должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации и составляться на языке, указанном в договоре между предприятием и внешнеэкономической организацией.

Техническая и товаросопроводительная документация должна быть завернута в оберточную бумагу по ГОСТ 8273—75 и вложена в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354—82 тол-

щиной не менее 100 мкм, а для стран с тропическим климатом — в два герметичных пакета толщиной не менее 150 мкм каждый с последующей упаковкой в водонепроницаемую бумагу по ГОСТ 8828—89.

Края водонепроницаемой бумаги должны быть склеены синтетическим клеем. Швы пакета из полиэтиленовой пленки должны быть герметично сварены.

5.10. В наружный пакет с товаросопроводительной документацией должен быть вложен вкладыш, изготовленный из бумаги или картона, с четкой надписью на языке, указанном в договоре между предприятием и внешнеэкономической организацией, которую можно прочитать, не вскрывая пакета.

Надпись допускается наносить на пакет. Товаросопроводительную документацию помещают в ящик с упакованной продукцией.

5.11. Один экземпляр упаковочного листа для термометров, предназначенных для экспорта в страны с умеренным климатом, должен быть помещен в пакет из водонепроницаемой бумаги или бумаги с полиэтиленовым покрытием и уложен в специальный карман ящика.

Для термометров, предназначенных для экспорта в страны с тропическим климатом, упаковочный лист должен быть помещен в пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 150 мкм, швы которого надежно сварены. Пакет должен быть дополнительно обернут в водонепроницаемую бумагу или покрыт полиэтиленовой пленкой и уложен в специальный карман ящика.

- 5.12. Упаковка термометров, отправляемых в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, в соответствии с требованиями ГОСТ 15846—79.
- 5.13. Термометры допускается транспортировать транспортом любого вида, кроме воздушного.
- 5.14. При хранении и транспортировании термометров, наполненных ртутью, температура окружающего воздуха должна быть от плюс 50 до минус 35°C, термометров, наполненных ртутноталлиевой амальгамой, от плюс 50 до минус 50°C.
- 5.15. Термометры транспортируют в крытых **транспортных** средствах.
- 5.16. Пакетирование грузовых мест проводят на поддоне по ГОСТ 9078—84, ГОСТ 9570—84. Число ящиков в одном пакете от 4 до 8 шт. Ящики с поддоном должны быть обвязаны в двух местах металлической лентой размером 0.4×20 мм по ГОСТ 3560-73.
 - 5.17. Транспортирование и хранение термометров, наполненных

толуолом, следует проводить в вертикальном или наклонном (не

менее 10° от горизонтали) положении резервуарами вниз.

5.18. Транспортирование и хранение термометров, отправляемых в районы Крайнего Совера и труднодоступные районы, — в соответствии с требованиями ГОСТ 15846—79.

5.19. Термометры следует хранить в закрытых помещениях.

Разд. 5. (Измененная редакция, Изм. № 5).

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие термометров требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок хранения для термометров, наполненных толуолом, — 12 мес, для всех остальных термометров —

24 мес с момента их изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации для термометров, наполненных толуолом,—12 мес, для всех остальных термометров—24 мес со дня ввода в эксплуатацию.

Для термометров, предназначенных для экспорта, гарантийный срок хранения и эксплуатации—12 мес с момента их проследования через Государственную границу.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления

РАЗРАБОТЧИКИ

- Н. Н. Карпов; В. Ф. Климова (руководитель темы)
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.02.80 № 748
- 3. B3AMEH FOCT 400-64
- 4. Периодичность проверки 5 лет
- 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН-ТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
FOCT 8.001—80 FOCT 8.279—78 FOCT 8.383—80 FOCT 9.302—88 FOCT 9.306—85 FOCT 166—89 FOCT 427—75 FOCT 1789—73 FOCT 2789—73 FOCT 2991—85 FOCT 3560—73 FOCT 4658—73 FOCT 5969—80 FOCT 5969—80 FOCT 7329—91 FOCT 8273—75 FOCT 8828—89	3.2 4.6 3.2; 5.1 4.8 2.10 4.2 4.2 2.10 2.10 5.5 5.16 2.2 5.4 2.2 5.4 2.9 5.9	FOCT 9078—84 FOCT 9142—90 FOCT 9570—84 FOCT 10144—89 FOCT 10350—81 FOCT 10354—82 FOCT 14192—77 FOCT 15102—77 FOCT 15155—89 FOCT 15527—70 FOCT 15841—88 FOCT 15846—79 FOCT 16511—86 FOCT 16536—90 FOCT 18337—80 FOCT 22852—77 FOCT 24634—81 FOCT 28498—90	5.16 5.5; 5.6 5.4 5.5 5.6; 5.9 5.2 5.5; 5.15 5.7 2.10 5.5 5.12; 5.18 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 2.2 5.5; 5.6 5.6 2.1; 4.1; 4.2; 4.5

- 6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 12.07.91 № 1252
- 7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в марте 1982 г., декабре 1986 г., декабре 1987 г., июне 1989 г., июле 1991 г. (ИУС 6—82, 3—87, 3—88, 9—89, 10—91)

Редактор Л. В. Афанасенко Технический редактор В. Н. Прусакова Корректор С. И. Гришунина

Сдено в набор 06 04.94. Подп. в печ. 06,05.94. Усл. печ. л. 1,63. Усл. кр.-огт. 1,63. Уч.-изд. д. 1,30. Тир. 725 экз. С 1299.